


Occlusal plane guide




この度は、「オクルーザル プレイン ガイド」をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を読んで正しくお使いください。

●オクルーザル プレイン ガイドは歯の配列をする際、咬合平面を決定するのに便利な設計になっています。

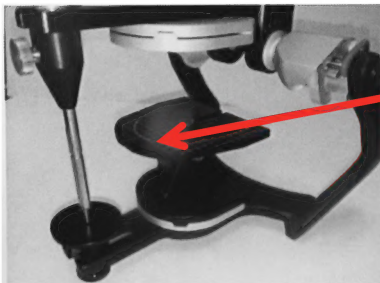


プレートの部分のメディアン ラインは前歯のガイドの役割をします。

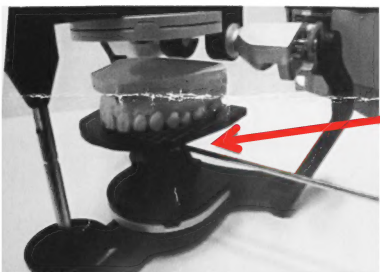


プレート下にあるネジを付属のレンチで緩め咬合平面を合わせます。再びネジを締めて固定して下さい。

咬合平面を決定した後、配列します。

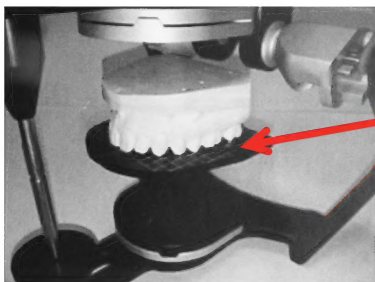

アーチラインで歯の配列を確認します。

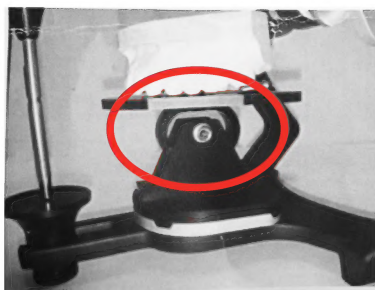

オクルーザル プレイン ガイドは上下、前後、傾斜の調節が可能で、咬合平面が自由に設定できます。

商品についてのお問い合わせ

取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合無償修理致します。

株式会社ビー エス エー サクライ

TEL (052) 805-1181 FAX (052) 805-1182

〒468-0014 名古屋市天白区中平四丁目115番地 <http://www.bsa-sakurai.co.jp> E-mail: contact@bsa-sakurai.co.jp